



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.)

| Fax ++39 0426 302228 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Agg. del 17/12/2024

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

STAN-TAP

REF. BVS172

**DISPOSITIVO PER LA PREPARAZIONE STANDARDIZZATA DEL SEDIMENTO URINARIO
DEVICE FOR THE STANDARDIZED PREPARATION OF THE URINARY SEDIMENT**

Conf. 1000 pezzi/pcs



Marcato CE IVD / CE Mark IVD

La standardizzazione dell'analisi del sedimento urinario può essere ora più semplice ed accurata. È importante che l'esame del sedimento sia eseguito seguendo sempre le stesse procedure in modo da garantire la ripetibilità del test, cosa difficilmente ottenibile con il sistema tradizionale attualmente in uso presso molti laboratori. Inoltre, la compattazione del sedimento urinario crea una sovrapposizione di cellule epiteliali rendendo difficoltosa la verifica della presenza di altri elementi cellulari.

Vantaggi: Lo **STAN-TAP** permette una rapida e ripetibile preparazione del campione di sedimento urinario per l'analisi al microscopio

The standardization of urinary sediment analysis can now be simpler and more accurate. It is important that the examination of the sediment is carried out always following the same procedures to guarantee the repeatability of the test, which is difficult to obtain with the traditional system currently used in many laboratories. Furthermore, the compaction of the urinary sediment creates an overlap of epithelial cells making it difficult to verify the presence of other cellular elements.

Advantages: The **STAN-TAP** allows rapid and repeatable preparation of the urinary sediment sample for microscopic analysis. Da utilizzare con / To be used with

BSP074 **Provetta conica in polistirolo
trasparente graduata a 1; 2,5; 5; 10 ml
Transparent polystyrene conical test
tube graduated to 1; 2.5; 5; 10 ml
Conf. 2000 pezzi/pcs**





Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.)

| Fax ++39 0426 302228 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Agg. del 17/12/2024

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

ISTRUZIONI PER L'USO: INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Riempire con l'urina la provetta fino al livello indicato dalla graduazione massima riportata sulla provetta stessa (10 ml).

Fill the tube with the urine up to the level indicated by the maximum graduation on the tube (10 ml).

2. Centrifugare/ *Centrifuge*



3. Inserire lo Stan-Tap esercitando una leggera pressione per permetterne l'incastro nella provetta.


Insert the Stan-Tap by exerting slight pressure to allow it to fit into the tube.



4. Decantare l'eccesso di urina capovolgendo rapidamente la provetta (ruotando di 180°). Nella provetta rimarranno il sedimento e il residuo di urina fino a 1 ml che verrà trattenuto nell'intercapedine tra provetta e Stan-Tap.

Decant excess urine by rapidly inverting the tube (by rotating 180°).

The sediment and urine residue up to 1 ml will remain in the tube and will be retained in the gap between the tube and the Stan-Tap.

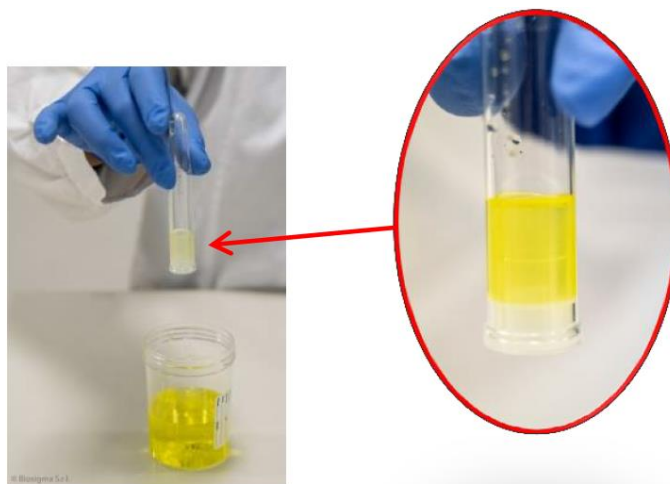

5. Riportare la provetta in posizione verticale ruotandola di 180°. Risospendere il sedimento e procedere all'analisi.

Bring the tube into a vertical position by rotating it 180°. Resuspend the sediment and proceed to the analysis.





Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.)

| Fax ++39 0426 302228 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Agg. del 17/12/2024

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

Lo STAN-TAP è un dispositivo integrativo al FAST-READ®

Dispositivi compatibili con STAN-TAP (BVS172):

The STAN-TAP is a supplementary device to FAST-READ®

Compatible devices with STAN-TAP (BVS172):

REF	Descrizione <i>Description</i>	Conf. di vendita <i>Sales package</i>	Immagine <i>Image</i>
BSP074	Provetta conica in polistirolo trasparente graduata a 1; 2,5; 5; 10 ml <i>Transparent polystyrene conical test tube graduated to 1; 2.5; 5; 10 ml</i>	2000 pezzi/pcs	
BSP075	Provetta conica da 10 ml in PS, graduata a 1; 2,5; 5; 10 ml con etichetta <i>Conical test tube 10 ml in PS, graduated to 1; 2.5; 5; 10 ml with label</i>	2000 pezzi/pcs	
BSP112	Provetta conica da 10 ml in PS, graduata a 1; 2,5; 5; 10 ml con etichetta e tappo a pressione bianco. <i>Conical test tube 10 ml in PS, graduated to 1; 2.5; 5; 10 ml with label and white pressure cap.</i>	1500 pezzi/pcs	
BSA064	Tappo in PE alettato per provette diametro 13 mm. <i>Stopper in PE with wings for 13 mm diameter test tubes.</i>	3000 pezzi/pcs	
BSV140	Pipetta Pasteur in PE FAST READ. Pasteur pipette in PE FASTREAD.	6000 pezzi/pcs	
BVS100	FAST READ® 102 1 conf=100 vetrini= 1000 determinazioni 1 conf = 100 slides = 1000 determinations		