



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com | www.biosigma.it

M521D
Rev. 18/04/2016

Pag. 1 di 3

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

SCATOLA DI STOCCAGGIO PER PROVETTE SOTTOVUOTO STORAGE BOX FOR VACUUM TUBES

Conf. 6 pz/pcs



Codice CND W0501010180



Scatola di stoccaggio per provette sottovuoto dopo l'analisi. Rende la gestione del campione di sangue dopo aver eseguito le analisi, più facile e più sicura. È la scelta ideale per la sicurezza in laboratorio e il controllo qualità.

- Due dimensioni: 200 x 190 x 85 mm per provette Ø13 x 75 mm o 200 x 190 x 110 mm Ø13 x 100 mm.
- Secondo il metodo di sigillatura che si intende usare, la scatola può essere chiusa con Silica Gel pad o Sticky Foam pad.
- Per diversi reparti clinici, tipo di analisi e data, sono disponibili 6 colori differenti di scatola: Rosso, Arancione, giallo, verde, blu e viola.
- Possibilità di inserimento di provette con etichette anomale come etichette multistrato, etichette avvolgenti o etichette corrugate, o provette di diametro non standard (comunque inferiore a Ø14mm).
- Possibilità di alloggiare fino a 100 provette
- In ABS (ACRILONITRILE BUTADIENE STIRENE) non autoclavabile

Storage box for vacuum tubes after analyzed. It makes the work for blood specimen after treatment faster, easier, and safer. It's the ideal choice for laboratory safety and quality control.

- According to the tube size, the box can match with tubes of two specifications: Ø13x75mm and Ø13x100mm.
- According to different sealing method, it can be used into two ways: Silica Gel pad or Sticky foam pad.
- For different clinical department, testing items and date, 6 different colors of box are available: Red, Orange, Yellow, Green, Blue and Purple.
- Special structure to avoid any inconvenience caused by abnormal label (like multi-layer label, turn up label or corrugated label) or non-standard bigger diameter tube.
- Possibility to store up to 100 tubes.
- In ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) not autoclavable.



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com | www.biosigma.it

M521D

Rev. 18/04/2016

Pag. 2 di 3

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET




CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

1. Premere leggermente il coperchio, la scatola si chiude bloccandosi automaticamente. Una leggera pressione sui pulsanti permetterà di aprirla facilmente.
2. Coperchio staccabile, permette di utilizzare il fondo della scatola come un rack.
3. Codifica stampata con numerazione da 1-100, comoda per la localizzazione dei campioni.
4. Etichetta multicolore, utile per scrivere informazioni correlate ed inserirle sulla scatola.
5. Maniglia interna nascosta, non ingombrante.
6. Impilabile, senza movimenti e slittamenti.
7. Possibilità di inserimento di provette con etichette anomale (come etichette multistrato, etichette avvolgenti o etichette corrugate, o provette di grande diametro inferiore a Ø14mm).

FEATURES:

1. Press down the cover slightly, the box will automatically lock and seal. One light press on the buckles can easily open it.
2. Detachable cover allows to use the bottom of the box as a rack.
3. Moulded code no of 1-100, convenient for locating the samples.
4. Multi-color label, easy to write related information and put on the box.
5. Hidden handle design, brief and delicate.
6. Particular locating slot design makes boxes stack available without moving or sliding.
7. Convenient to put or take out tubes with abnormal label (like multi-layer label, turn up label or corrugated label, or tubes with big diameter less than Ø14mm).

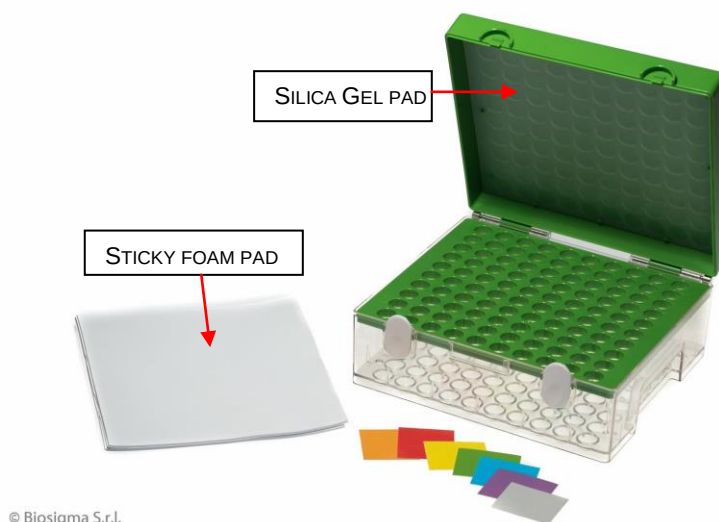

© Biosigma S.r.l.

Silica Gel Pad:

- Adattato allo stoccaggio di provette sottovuoto per il prelievo di sangue dopo la rimozione del tappo.
- Il Silica Gel pad è prodotto in materia prima superiore per mantenere stabili le proprietà fisiche e chimiche.
- Flessibile e non deformabile, sigilla le provette mentre si ha la chiusura del coperchio.
- Assicura una superficie piatta del pad verso l'esterno, che altrimenti potrebbe incidere sulla tenuta.

Silica Gel Pad :

- Adapted to store vacuum blood collection tubes after cap removed.
- The Silica Gel pad is made by superior raw material to keep its physical and chemical property stable.
- Flexible and no deformation, combines tight with tubes while closing the cover.
- Ensure the flat surface of the pad outward, or else it would affect the sealing.



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |
E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> | www.biosigma.it

M521D

Rev. 18/04/2016

Pag. 3 di 3

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

Sticky Foam pad:

- Adattato allo stoccaggio di provette sottovuoto per il prelievo di sangue dopo la rimozione del tappo.
- Caratteristiche: facile e conveniente per lo smaltimento senza rischio di contaminazione.
- Forte adesione, può sigillare ermeticamente le provette per il prelievo di sangue dopo la chiusura del coperchio.

Sticky Foam pad :

- *Adapted to store vacuum blood collection tubes after cap removed.*
- *Features: Easy and convenient for disposal without blood pollution.*
- *Strong adhesion can tightly seal the blood collection tubes after closing the cover.*

REF	Descrizione / Description	Silica Gel pad	Sticky Foam pad	Dim. L x l x H	Posti Places	Conf.
BSP277	Scatola di stoccaggio per provette sottovuoto Ø13x100 mm <i>Storage box for Ø13x100 mm vacuum tubes</i>	x	x	20 x 19 x 11 cm	100	6
BSP278	Scatola di stoccaggio per provette sottovuoto Ø13 x 75 mm <i>Storage box for Ø13 x 75 mm vacuum tubes</i>	x	x	20 x 19 x 8,5 cm	100	6

DEFINIZIONE DEL FABBRICANTE:

MANUFACTURER DEFINITION:

BIOSIGMA s.r.l.

Via Valletta, 6 - 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY
Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228
E-mail: info@biosigma.com
<http://www.biosigma.com> ; www.biosigma.it

CLASSIFICAZIONE:

Ai fini della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro recepita in Italia con D.L. n. 332, G.U.R.I. n. 269 del 17 novembre 2000, Biosigma S.r.l. classifica i suddetti prodotti come dispositivi medico-diagnostici in vitro e li classifica come "Altri dispositivi medico-diagnostici in vitro", quindi da rendere conformi all'allegato III della direttiva.

La Dichiarazione di conformità alla **Direttiva 98/79/CE** è disponibile su richiesta.

CLASSIFICATION:

In order to the Directive 98/79/CE concerning medical-diagnostic in vitro devices receipt in Italy with D.L. n. 332 G.U.R.I. n. 269 dated 17th November 2000, Biosigma s.r.l., defines all the components of the above-state family as medical-diagnostic in vitro devices and classifies it as "Other medical-diagnostic in vitro devices", in order to make conformable the attachment III of the directive.

*The Declaration of Conformity in accordance to the **Directive 98/79/CE** is available, on request.*